






ARIANAMED

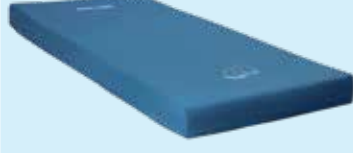

Mattress

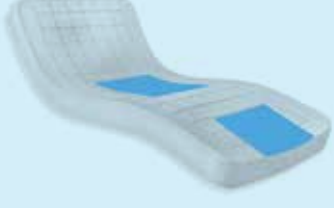


Cushions

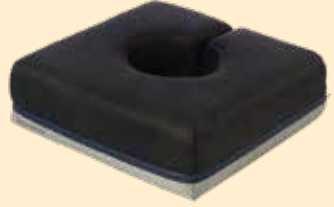

Restraint Systems



Transfer Roll

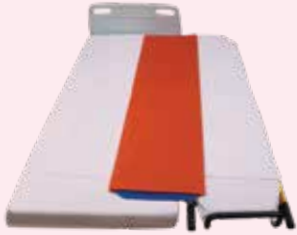

معرفی شرکت آریانا تشخیص ابزار

شرکت تجهیزات پزشکی آریانا تشخیص ابزار در سال ۱۳۸۹ و با توجه به سابقه چندین ساله موسسان آن در حوزه تجهیزات پزشکی و با هدف ارتقای سلامت جامعه از طریق توسعه تولیدات تجهیزات پزشکی دانش بنیان تاسیس گردید. هدف شرکت از ابتدا بالا بردن سطح کیفی هتلینگ مراکز درمانی سراسر کشور، بهبود وضعیت نگهداری بیماران، تسهیل خدمات پرستاری و کاهش هزینه مراکز در طول دوره درمان بیماران از طریق تولید محصولات با استانداردهای روز بین المللی بوده است. دورنما: تولید محصولات قابل رقابت در عرصه بازارهای بین المللی و نزدیک تر کردن سطح هتلینگ بیمارستان ها و مراکز درمانی کشور به استانداردهای جهانی.

Introduction


Ariana Tashkhis Abzar was established in 2010. Focused all its efforts on sore prevention and patient care products. The company expands product lines and improving upon existing memory polymers and chemical formulate to deliver superior sore prevention products. Ariana also has a wide range of restraint systems which have been used in different hospitals and health centers.

Quality Certificates:

تائیدیه ها و گواهینامه ها:



Sectors: Hospitals, Clinics, Health Centers, Emergency, Orthopedics, Home Care, Elderlies

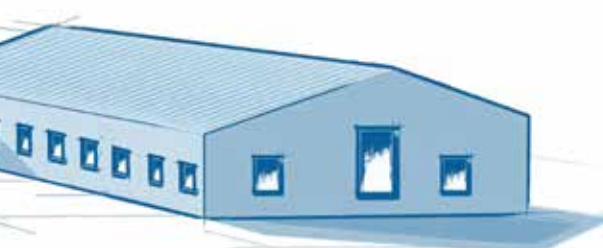

More info:

www.arianamed.com
www.aparat.com/arianamed

www.instagram.com/tashkhisabzar
www.digikala.com/search/arianamed
[www.linkedin.com/ariana tashkhis abzar](https://www.linkedin.com/ariana-tashkhis-abzar)

ARIA-PRO+ Memory Foam Mattress:

Two-layer mattress. Visco-elastic thermal foam which is located between a 3D spacer fabric and a cold foam core. Visco-elastic layer reacts to pressure and warmth and adapts to the body in a optimize shape. The mattress adapts to the contours of the body for optimum distribution of pressure and reacts to the patient's every move. This leads to a better blood circulation and reduces the risk of decubitus.

تشک فومی حافظه دار مدل ARIA-PRO+:


تشک فومی ARIA-PRO+ از دو لایه فوم تشکیل شده است. فوم ویسکو الاستیک در لایه بالایی و فوم سرد HR در پایین قرار گرفته و توسط لایه هوایی سه بعدی احاطه شده اند. لایه ویسکو الاستیک به تغییرات فشار و دما واکنش نشان داده و با تقسیم فشار بهترین حالت انطباق با فرم بدن بیمار را به خود می گیرد، این امر موجب بهبود گردش خون و کاهش ریسک ابتلا به زخم بستر می شود. همچنین لایه هوایی 3D تشک موجب کاهش تعریق پوستی می گردد.

Technical Specifications:

- Suitable for high risk patient (up to stage 3)
- Viscoelastic foam with 85 kg/m^3 density
- High Resilience Foam with 50 kg/m^3 density
- Use 3D fabric to reduce moisture
- For patients from 30 to 200 kg (66 to 440 lbs)
- Non Energetic
- Two years guarantee for foam and a year for cover
- Dimension $200 \times 90 \times 16 \text{ cm}$ (more size upon request)

ویژگی ها و مشخصات فنی:

- قابلیت استفاده برای بیماران تا High Risk (سطح ۳ زخم بستر)
- فوم ویسکو الاستیک با دانسیته 85 kg/m^3
- فوم (High Resilience) HR با دانسیته 50 kg/m^3
- استفاده از پارچه های سه بعدی و Spacer برای بهبود گردش هوا و کاهش تعریق
- قابلیت تحمل وزن بیمار از ۳۰ تا ۲۰۰ کیلوگرم
- بدون نیاز به انرژی برقی
- دو سال گارانتی فوم و یک سال روبه
- سایز تشک $18 \times 90 \times 200$ سانتی متر (تولید در سایز سفارشی)

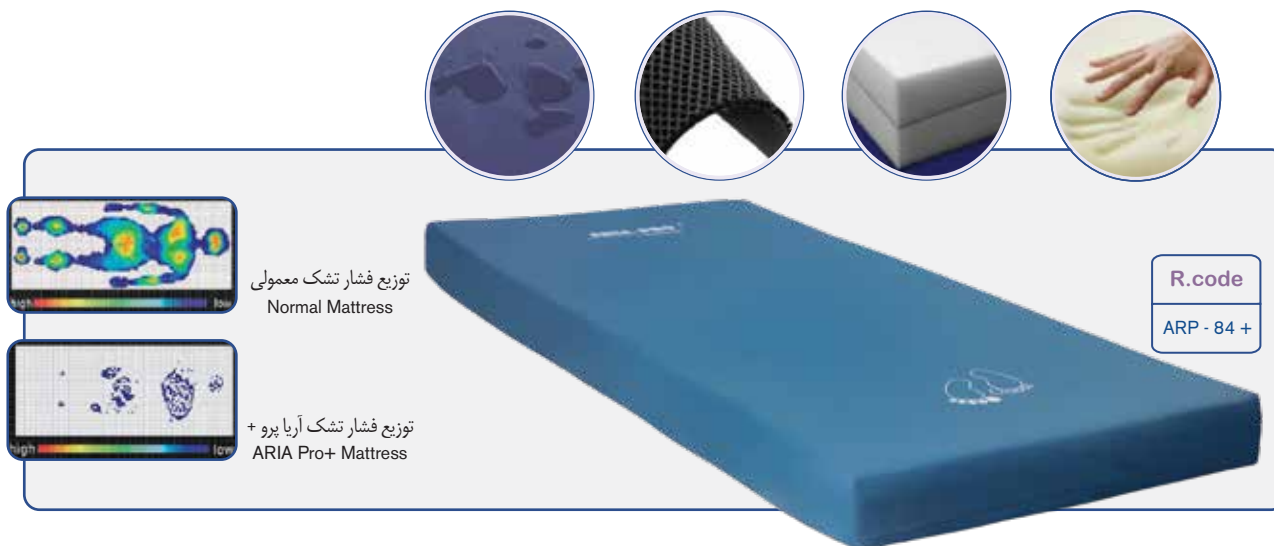

ARIA-Pro Memory Foam Mattress:

Two-layer mattress. Visco-elastic thermal foam which is located between a 3D spacer fabric and a cold foam core. Visco-elastic layer reacts to pressure and warmth and adapts to the body in a optimize shape. The mattress adapts to the contours of the body for optimum distribution of pressure and reacts to the patient's every move. This leads to a better blood circulation and reduces the risk of decubitus.

تشک فومی حافظه دار مدل ARIA-Pro:

تشک فومی ARIA-Pro از دو لایه فوم تشکیل شده است. فوم ویسکو الاستیک در لایه بالایی و فوم سرد HR در پایین آن قرار گرفته و توسط لایه هوایی سه بعدی احاطه شده اند. لایه ویسکو الاستیک به تغییرات فشار و دما واکنش نشان داده و با تقسیم فشار بهترین فرم را در انطباق با بدن بیمار به خود می گیرد، این امر موجب بهبود گردش خون و کاهش ریسک ابتلا به زخم بستر می شود. همچنین لایه هوایی 3D تشک موجب کاهش تعریق پوستی می گردد.

Technical Specifications:

- Suitable for medium to high risk patient (up to stage 2 - 3)
- Viscoelastic foam with 85 kg/m³ density
- High Resilience Foam with 50 kg/m³ density
- Use 3D fabric to reduce moisture
- For patients from 30 to 180 kg (66 to 396 lbs)
- Non Energetic
- Two years guarantee for foam and a year for cover
- Dimension 200*90*14 cm (more size upon request)

ویژگی ها و مشخصات فنی:

- قابلیت استفاده برای بیماران Medium تا High Risk (سطح ۲ تا ۳ زخم بستر)
- فوم ویسکو الاستیک با دانسیته ۸۵ kg/m³
- فوم HR (High Resilience) با دانسیته ۵۰ kg/m³
- استفاده از پارچه های سه بعدی (Spacer) برای بهبود گردش هوا و کاهش تعریق
- قابلیت تحمل وزن بیمار از ۳۰ تا ۱۸۰ کیلوگرم
- بدون نیاز به انرژی برق
- دو سال گارانتی فوم و یک سال روبه
- سایز تشک ۱۴*۹۰*۲۰ سانتی متر (تولید در سایز سفارشی)



ARIA-HR Mattress:

ARIA hospital mattress is made of flexible and high density High Resilience foam with 50 kg/m³ density. This mattress reduces the pressure and minimizes the risk of developing ulcer and it is suitable for Low Risk patients. It has maximum comfort in all position for patients.

تشک فومی بستری HR مدل ARIA:


تشک فومی بستری مدل ARIA با رویه مخصوص بیمارستانی، تشکی ایده آل برای کاهش ریسک آسیب به پوست بیمار بوده که با انعطاف پذیری بالا موجب راحتی بیمار می شود. این تشک همچنین برای بیمارانی با ریسک پایین ابتلا به زخم بستر به کار رفته و با استفاده از فوم سرد HR با دانسیته بالا، بهترین حالت انطباق با بدن بیمار را ایجاد می کند.

Technical Specifications:

- Suitable for Low Risk Patients (up to stage 1)
- High Resilience Foam with 50 kg/m³ density
- For patients from 30 to 130 Kg (66 to 288 lbs)
- High flexibility
- Two years guarantee for foam and a year for cover
- Dimension 200*90*10 cm (More sizes upon request)

ویژگی ها و مشخصات فنی:



- قابل استفاده برای بیماران Low Risk (سطح یک زخم بستر)
- فوم HR (High Resilience) با دانسیته 50 kg/m³
- قابلیت تحمل وزن بیمار تا ۱۳۰ کیلوگرم
- انعطاف پذیری بالا
- دو سال گارانتی فوم و یک سال رویه
- سایز تشک ۱۰*۹۰*۲۰ سانتی متر (تولید در سایز سفارشی)

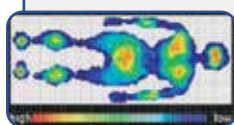

توزیع فشار تشک معمولی
Normal Mattres



توزیع فشار تشک آریا
ARIA Mattres

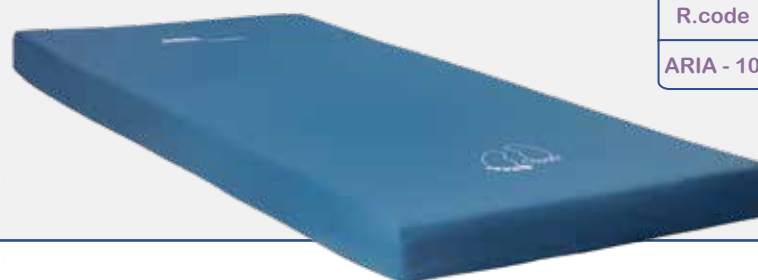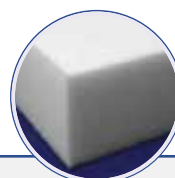

R.code

ARIA - 10




ARIA-Ped Memory Foam Mattress:

- Anti allergy for pediatrics skin
- Memory foam reducing pressure
- Suitable for PICU and pediatric wards
- Two years guarantee for foam and a year for cover
- Dimension 165*70*14 cm (more sizes upon request)

تشکۀ فومی حافظه دار ضد زخم بستر اطفال مدل ARIA-Ped:

- بدون ایجاد حساسیت پوستی برای اطفال
- فوم حافظه دار با قابلیت کاهش فشار بدن
- مناسب جهت PICU و بخش های بستری اطفال
- دو سال گارانتی فوم و یک سال روبه
- سایز تشک ۱۴*۷۰*۱۶۵ سانتی متر (تولید در سایزهای سفارشی)

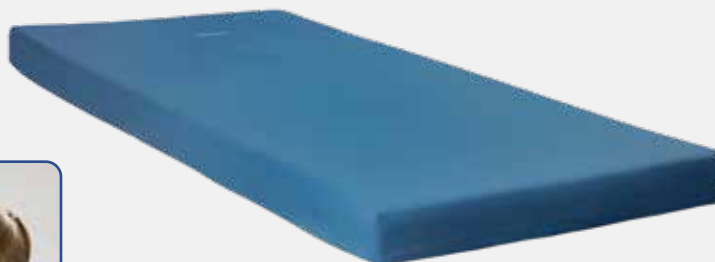

R.code

ARIA - Ped

ARIA-Neo Specifications:

- Memory Foam in 4 cm with ability to reduce infant's pressure
- Anti Allergy for neonate skin
- Can be used in incubator, resuscitation and infant bed
- Two years guarantee for foam and a year for cover
- More sizes upon request

تشکۀ فومی حافظه دار نوزاد مدل ARIA-Neo:

- فوم حافظه دار با قابلیت کاهش فشار بدن نوزاد با ضخامت ۴ سانتی متر
- بدون ایجاد حساسیت پوستی برای نوزاد
- قابل استفاده در انکوباتور، تخت احیاء و کات نوزاد
- دو سال گارانتی فوم و یک سال روبه
- تولید در سایزهای سفارشی



R.code


ARIA - Neo

Medical Cover Specifications:

- Pu Coated Polyester Fabric
- Waterproof (EN ISO20811)
- Breathable (ASTM E93-96 BW) and Vapor Permeable
- Washable up to 60 C

مشخصات فنی رویه:

- Flame Retardent
- Antibacterial and Anti Fungi
- Anti-Allergy
- Anti-Static

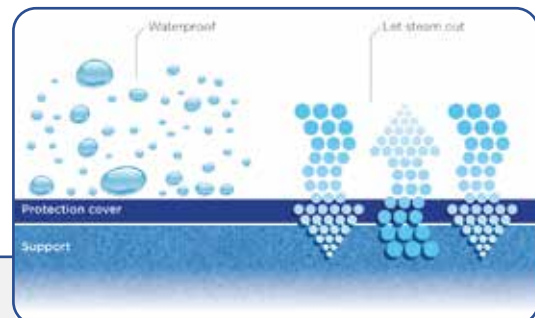

رویه مدیکال:

رویه مدیکال طراحی شده بر اساس بالاترین معیارهای پزشکی و بهداشتی و مناسب برای استفاده در بیمارستان ها، کلینیک ها و درمان های خانگی بوده و نیز جهت انواع تشک های مواج و بستری به کار می رود.

Medical Cover:

The cover accord with high medical quality is designed for hospitals/clinics and home remedies. Medical cover is used for alternative pressure mattress too.

R.code

ARC-HL

Features Overview:

جدول مقایسه ای تشک ها:

Model	See Page	Hight	Max Patient Body Weight	Expected Decubitus Risk			
				Low	Medium	Medium / High	High
Aria Pro+	2	16	200				●
Aria Pro	3	14	180			●	
Aria	5	10	130	●			
Aria Ped	6	14				●	
Aria Neo	6	4	8				





Aria Cube Series Mattress Features:

- Ease of installation and application
- High patient comfort and ability to move or replace gelpad or memory based on patient pressure ulcer risk
- Permanent air flow under patient body for reduction of surface pressure
- Foam surface non connectivity allows each section to have higher flexibility while in contact with patient body.
- The pads used result in lowering pressure unto very high risk pressure ulcer
- Long shelf life of gelpad and foam
- No need for repair or connection to electrical source
- Two year guarantee for replacement of foam and pad


مزیت های تشک های سری آریاکیوب:

- استفاده و نصب راحت
- میزان بالایی احساس راحتی بیمار و امکان جابجایی و یا تعویض gelpad و memory بر اساس ریسک زخم بستر فرد
- گردش دائمی جریان هوا در زیر بدن بیمار جهت کاهش فشار سطح
- عدم پیوستگی سطح فوم باعث می شود هر قسمت به صورت جداگانه انعطاف پذیری بالاتری را با بدن بیمار داشته باشد.
- کاهش فشار سطح نسبت به پدهای استفاده شده تا سقف very high risk
- طول عمر طولانی foam و gelpad
- عدم نیاز به تعمیر و اتصال به برق
- دو سال گارانتی تعویض فوم و پد

Risk Table of Aria Cube Series Mattress:

جدول میزان ریسک پذیری تشک های سری آریاکیوب:

	High Risk			مدل با ژله
	Medium/ High Risk			مدل با مموری فوم
	Low Risk			مدل ساده

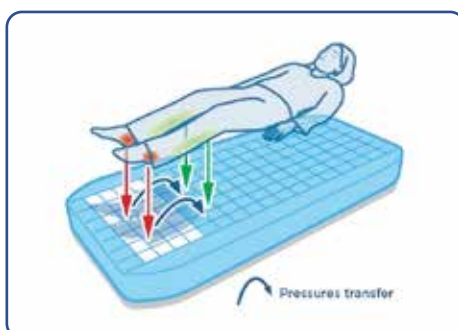

Aria Cube Cold Foam Mattress:

Aria Cube cold foam mattress with Gelpad is suitable for high risk pressure ulcer and with its replacement with memory foam it is proper for medium/ high risk. If only one cold foam layer is used then the mattress is suitable for low risk.

تشک فوم سرد آریاکیوب:

تشک فوم سرد آریاکیوب با gel pad در طبقه بندی زخم بستر very high risk می باشد و با تعویض آنها با memory foam در مرحله medium / high risk قرار گرفته و در صورت داشتن فقط یک لایه فوم سرد در سطح low risk می باشد.

Ariana Memory Foam Pillow:

Ariana pillows consist of high density memory foam which conform to fit your unique profile, resulting in cradling effect that holds your head and neck in neutral alignment. Ariana pillows reduce the Neck pain and allow you to change positions without losing out on support as well.

- It is available in Large and XLarge size

بالشت مموری فوم آریانا:

بالشت مموری فوم آریانا از فوم حافظه دار با دانسیته بالا تشکیل شده که با پوشاندن قسمت منحنی گردن، ستون فقرات شما را در بهترین حالت خوابیدن قرار می دهد. در هنگام استفاده از این بالشت سر و گردن با ستون فقرات در یک راستا قرار گرفته و فشار کمتری به این نواحی وارد می شود. ضمن آنکه از دردهای عضلانی ناشی از گرفتگی ماهیچه ها و آرتروز پیشگیری می نماید. این بالشت در دو مدل مختلف با روکش خانگی و رویه PU جهت مصارف بیمارستانی عرضه می گردد.



R.code	Size
AR900	XL
AR901	L

Memory Foam Heel Support Boot:

Ariana memory foam heel support boot is used to cases in which the lower organs are immobilised, as part of sore prevention. These boots are also used to prevent foot drop which is very common problem in ICU'S and CCU'S.

نیم چکمه (پاشنه گیر) مموری فوم آریانا:

- نگهدارنده پاشنه آریانا از جنس فوم حافظه دار بوده و جهت جلوگیری از ایجاد زخم بستر در ناحیه پاشنه پا به کار می رود.
- محفظه ی خالی موجود در قسمت پاشنه ی پا به همراه فوم حافظه دار استفاده شده در آن باعث کاهش فشار و جلوگیری از به وجود آمدن زخم بستر در پاشنه می شود.
- نیم چکمه فوق مچ پا را در حالت قائم نگه می دارد که این امر مانع از به وجود آمدن افتادگی کف پا (Foot Drop) که یکی از مشکلات شایع در بخش های بیمارستانی است می گردد.




R.code
AR 980

Positioning Cushions:

بالشتک های مراقبت های ویژه:

بالشتک های پوزیشنینگ مراقبت های ویژه از دو لایه فوم سخت HR و مموری فوم تشکیل شده است. این بالشتک ها علاوه بر پوزیشن دادن به بیماران مختلف، با کاهش فشار وارده بر ناحیه مورد نظر باعث راحتی و کمک به کاهش ریسک ابتلا به انواع زخم های بستر می شوند. رویه PU آن به راحتی شسته و ضد عفونی می گردد.

Intensive care positioning cushions consist of tow different layers, includes HR and memory foam. Besides positioning different patients these cushions also reduce the pressure of different parts of body and therefore reduce the risk of bedsores. Spacer layer also reduce the sweat and PU cover is washable and bactrical retardant.

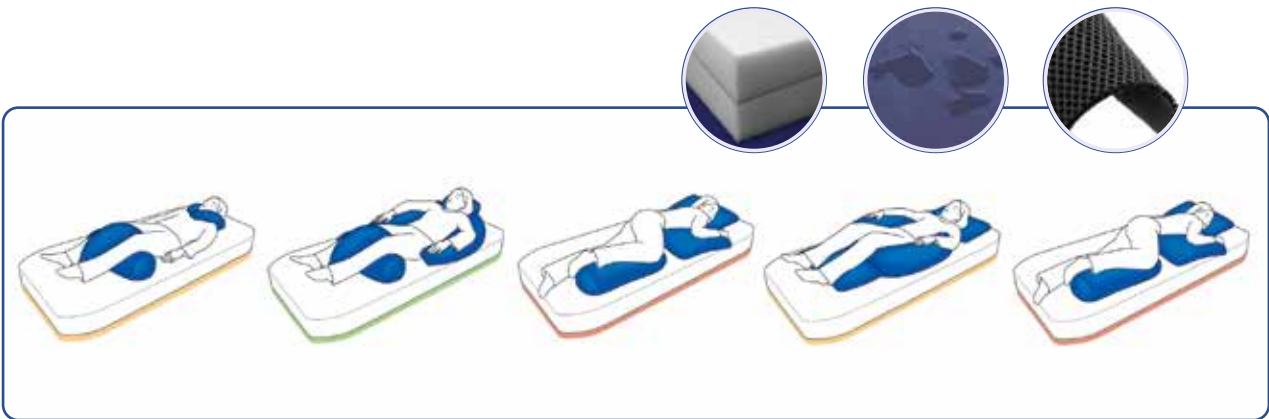

بالشتک در دو اندازه کوچک و بزرگ:

این بالشتک ها به بیمار کمک می کنند تا فشار وارده بر پاشنه، نواحی بیرونی زانو و قوزک پا کمتر شود. همچنین جهت استفاده در زیر سینه یا شانه بیمار نیز به کار می روند. علاوه بر این، محصول فوق می تواند به عنوان بالشت زیر سری مورد استفاده قرار گیرد.

Large & Small Cushion:

Small and Large Cushions. This form of cushion is the perfect supporting aid. It helps support the patient, relieves the pressure on the heels, protects the internal lateral knee areas, ankles and can be used as pillow used by itself or with other devices.



R.code	Size
AR 902	Large
AR 903	Small

بالشتک سیلندری:

این بالشتک در وضعیت های گوناگونی مورد استفاده قرار می گیرد. به عنوان مثال، هنگامی که بیمار در حالت نیمه نشسته قرار دارد (نیمه نشسته حالتی است که در آن بالا تنه بیمار با زاویه ۳۰ تا ۴۵ درجه قرار دارد) با قرار دادن بالشتک سیلندری در قسمت زیر زانو و بخش انتهایی زانو، زیر سینه و زیر دست مورد حفاظت قرار می گیرد.

Cylindrical Cushion:

It can be used in various ways, such as placing it under the knees to maintain lower limbs in semi-fowler positions.



R.code	Size
AR 904	Large
AR 907	Small

Neck Holder:

Comfortably supports the head both in sitting or semi-reclined positions.
It is available in Large and Xlarge.

بالشتك حلقه ای:

مناسب برای سر در دو حالت نشسته و نیمه دراز کش دارای سایزهای بزرگ و کوچک



R.code	Size
AR 905	Large
AR 908	Small




Lateral Positioning Cushion:

- Design with integrated pillow for optimal comfort.
- Ensures comfortable positioning of the knees, pelvis and upper body when in lateral position.
- Also it can be used for women during pregnancy.

بالشتك لترال:

- بالشت یکپارچه تشکیل شده از فوم HR و مموری فوم جهت حداکثر راحتی بیمار
- مناسب و مطمئن برای زانو، لگن و قسمت بالای بدن
- قابل استفاده برای زنان باردار

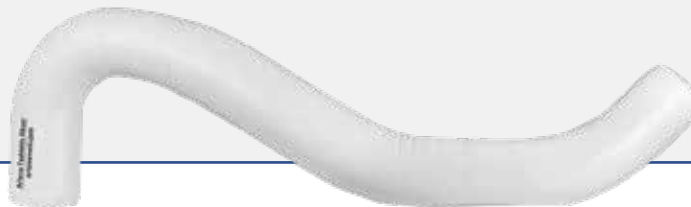

R.code
AR 906

Foam Chest Roll:

Two-Layer Chest Rolls Consist of HR and memory foam, reduce the pressure and help the operator to position the patients in different wards.

چست رول فومی:

چست رول های فومی از دو لایه فوم HR و فوم حافظه دار تشکیل شده اند و علاوه بر کاهش فشار وارده بر بیمار، در پوزیشن دادن به بیماران مختلف به پرسنل کمک می کنند.



R.code
AR 047
AR 043
AR 046

ARIANA Memory Foam Lumbar Cushion:

Arianamed support cushion uses an adjustable strap and soft high quality memory foam. This means better support and ultimate comfort and less pain. This cushion reduces stress on lower spine from improper posture. Relax your back and relieves lower back. This cushion has adjustable strap for different wheelchairs and chairs. Size: 46*38*4 cm

R.code

AR 919



پشتی مموری فوم آریانا:

بالشتک مموری فوم صندلی باعث قرار گرفتن ستون فقرات در حالت طبیعی و ایده آل گشته و فوم حافظه دار آن باعث تقسیم فشار وارده و در نتیجه بهبود گردش خون می شود.

با توجه به اینکه طریقه مناسب نشستن اهمیت زیادی داشته و بسیاری از دردهای مفصلی و عضلانی ناشی از عدم توجه به این موضوع است، استفاده از این محصول در هنگام نشستن سطح اتکای مناسبی را برای نگه داشتن کمر و سطح پشتی بدن شما ایجاد می کند. این محصول قابل استفاده بر روی صندلی خودرو، اداری، راحتی و انواع ویلچر می باشد.

- با رویه اسپیسر هوازی
- اندازه: ۴۶*۳۸*۴ سانتی متر

Wheelchair Cushion:

The memory foam wheelchair cushion is used to avoid bedsores in patient's body who is confined in a wheelchair for a long time.

بالشتک مموری فوم ویلچری:

این بالشتک جهت جلوگیری از زخم بستر در بیمارانی که مدت زمان زیادی را بر روی صندلی چرخدار هستند، به کار می رود. دارای گردش هوا، کاهش تعریق پوستی و حرارت نامطبوع بدن بیمار. در صورت سفارش این محصول با رویه PU نیز عرضه می گردد.

Aria3 Cushion:



AR 912
بالشتک ویلچری آریا ۳ حفره دار
Medium Risk
40*40*12 cm

Aria Cushion:



AR 910
بالشتک نشیمن ۴ سانت
Low Risk
40*40*4 cm

Aria-Pro+ Cushion:



AR 911
بالشتک ویلچری آریا پرو پلاس
High Risk
40*40*8 cm

Aria-Pro Cushion:



AR 913
بالشتک ویلچری آریا پرو
Medium to High Risk
40*40*12 cm

Aria-3 Cushion:



AR912/PU
بالشتک ویلچری آریا ۳ حفره دار با رویه PU
Medium Risk
40*40*12 cm

کلیه بالشتک ها در مدل بیمارستانی با رویه PU موجود می باشند.

All cushions are available with PU cover for hospitals and health centers.

Aria 5 Cushion:



AR914
بالشتک ویلچری ۵ سانت HR
Low Risk
40*40*5 cm

ARIANA Secure Fasten Wrist Holder With Ring:

Prevents pressure being exerted on the wrist. With safety D-ring. Inner layer made of %75 polyester and %25 viscose to avoid allergies. Breathable and comfortable. Easy to adjust. Great restrain properties. Can be used interchangeably to restraint wrists or ankles.

• Benefits

Better tolerated by the patient. Prevent skin injuries by laceration and abrasion. Made of Hypoallergenic material. Saves time to nurses. More safety and comfort for the patient.



R.code	Size
AW 3010	Adult
AW 3011	Infant

دستبند و پابند نگهدارنده بیمار با حلقه فلزی مدل ARIANA :

برای نگهداری بیماران بی قرار در بخش های مختلف بیمارستانی و جلوگیری از ایجاد هرگونه آسیب یا صدمه به آنان به کار می رود.

مزایای استفاده:

- جلوگیری از وارد آمدن فشار به مچ و با قوزک پای بیمار
- لایه داخلی نرم جهت جلوگیری از هرگونه آسیب به پوست بیمار
- بدون ایجاد هرگونه حساسیت پوستی و افزایش راحتی بیمار
- قابل تنظیم برای بیماران در سنین مختلف
- راحتی عملکرد برای پرسنل بخش

ARIANA Abdominal Safety Belt:

It is flexible and adapts to patient's waistline without bending. Safe and easy fastening by means of very strong polyester straps and light nylon rings. Fully padded with soft and breathable tissues. Inner layer made of %75 polyester and %25 viscose. Capable to absorb pressure maintaining its performances.

• Benefits

It does not strangle the patient and allows the postural movements. Facilitates nursing work. Comfortable for the patient.



کمربند نگهدارنده بیمار مدل ARIANA :

این کمربند برای کاهش احتمال افتادن یا سقوط بیماران از روی تخت و یا برانکارد و جلوگیری از ایجاد هرگونه آسیب به بیماران مختلف به کار می رود.

نحوه استفاده از کمربند:

ابتدا با توجه به سایز بیمار کمربند را دور کمر بسته و نگه می داریم.
سپس بندهای متصل به دو طرف را به صورت ضربدری قرار داده و از حلقه طرف مقابل رد می کنیم.
انتهای بند را از تخت بیمار گذرانده و کشیده تا بیمار در موقعیت ثابتی قرار گیرد.
انتهای بند را به تخت گره می زنیم.

R.code

AB 5002

دستبند و پابند دائمی نگهدارنده بیمار مدل ARIANA:

پابند و دستبند نگهدارنده بیمار از جنس نرم نئوپرن (NeoPrene) بوده که برای جلوگیری از وارد آمدن آسیب در بیماران بی قرار به کار می روند. این ابزار با سیستم قفل سریع علاوه بر کاربری آسان و محدود کردن بیماران، برای پرسنل در مواقع ضروری بسیار سریع و راحت می باشند. این دستبند و پابند برای بخش اورژانس، نروسرجری و ICU ها که زمان اهمیت حیاتی دارد، بسیار مناسب می باشند. همچنین دستبند و پابند ARIANA برای بیمار نیز بسیار راحت بوده و هیچ گونه آسیبی به پوست و اعصاب بیمار وارد نمی کند. طراحی قفل مغناطیسی جدید این محصول باعث راحتی کار پرسنل بوده و از جمله مزایای آن این است که فقط پرسنل مسئول می توانند آن را باز یا بسته نمایند.

ARIANA Anklebands:

Restraining neoprene ankle bands with double Velcro closure. Prevent injuries and falling out of bed or stretcher due to psychiatric restraint problems. Closure with safety clip on the ankles.

ARIANA Wristbands:

Restraining neoprene wrist bands with double Velcro closure. Prevent injuries and falling out of bed or stretcher. Closure with safety clip on the wrists. Since psychiatric restraint is a delicate matter.



R.code
AWD 3020

R.code
AWD 3030

دستبند نگهدارنده اعصاب و روان مدل ARIANA:

دستبند مدل آریانا برای نگهداری بیماران بی قرار در بخش های ویژه بیمارستانی و نیز مراکز اعصاب و روان به کار می رود. این دستبند با پد نرم قسمت داخلی آن، باعث راحتی بیمار شده و از ایجاد آسیب های مختلف در اثر فشار یا سایش به دست بیمار جلوگیری می کند. قفل مغناطیسی طراحی شده در آن موجب ایمنی بیشتر برای بیمار و راحتی پرسنل درمانی شده و احتمال هرگونه آسیب را از میان برمی دارد.

ARIANA Wristbands:

The Ariana wristbands allow to ensure the patient's hands to the bed. These are fixed to the bed structure by a long adjustable band.

- The Controlled Mobility System work combined with the abdominal belt, passing the wristband band through the lower belt loop, thus limiting the movements outside the perimeter of the bed.
- The inside of the wristbands is made of a soft touch padding, preventing pressure sores or abrasions.
- The wristbands contains an area with Velcro® that allows faster and tight application, increasing system security.

پابند نگهدارنده اعصاب و روان مدل ARIANA:

پابند مدل آریانا همانند دستبند آن برای فیکس کردن پای بیماران بی قرار در بخش های ویژه بیمارستانی و نیز مراکز اعصاب و روان به کار می رود. قسمت داخلی آن با پد نرم باعث راحتی بیمار و جلوگیری از هرگونه آسیب در اثر فشار یا سایش به پای بیمار می شود. قفل مغناطیسی طراحی شده در آن موجب ایمنی بیشتر برای بیمار و راحتی پرسنل درمانی شده و احتمال هرگونه آسیب را از میان برمی دارد.

ARIANA Anklebands:

The Ariana anklebands allow to ensure the patient's feet to the bed. The set composes a strap fixed to the bed structure and two independent ankle bands that are fixed to the bed by locks.



Wristbands			Anklebands		
R.code	Color	Size	R.code	Color	Size
3050	●	S	3060	●	S
3051	●	M	3061	●	M
3052	●	L	3062	●	L
3053	●	XL	3063	●	XL



4 Lock buttons

1 Magnetic key

Harness with Thorax Band:

It inhibits patient vertically upward movement and is designed to be very flexible.

Thorax band hinders slipping and harness to be loosen.

The transversal strap part of the restraint stops fast and violent patient movement. Therefore, it prevents patient self injury or injuring others.

If patient is non violent the transversal strap can be removed.

This allows the patient to sit up and prevents slipping up.

If fixation to the belt is not used, harness bands can be used in parallel position. That is they are used in an uncrossed position.

This allows the restraint not to touch large patient's neck or prevent pressure on the patient's sternum.

کمربند مهار کننده قفسه سینه:

نگهدارنده قفسه سینه مانع از بلند شدن یا جابجایی بالاتنه ی بیمار می شود. این محصول دارای یک بند عرضی است که از حرکات شدید و خشن بیمار و در نتیجه احتمال آسیب به بیمار یا سایر افراد جلوگیری می کند. برای بیماران غیر تهاجمی امکان استفاده از این نگهدارنده بدون بند عرضی نیز میسر است که امکان تحرک بیشتر و راحت تر را به بیمار می دهد. در مدل ساده آن که نگهدارنده به کمربند متصل نیست بندها می توانند به صورت موازی قرار گیرند که این امر باعث کاهش تماس بندها با گردن و کاهش فشار روی ناحیه جناق سینه می شود.



Harness with Thorax band

R.code

AWD3080

ARIANA Complete Set:

The complete set is the global solution of secure restraint for bedridden patients. It permits having the maximum level of security of the patient and the medical staff, because of bed restraint is a not easy issue. As consists of individual elements can be used as required at the time.

Complete
Psycho Set

R.code

AWD3090



Abdominal Belt

R.code

AWD3070



ست کامل نگهدارنده اعصاب و روان مدل ARIANA:

ست کامل نگهدارنده بیمار بیشترین میزان امنیت را برای بیمار و پرسنل فراهم می کند. این ست کامل از قسمت های مختلفی تشکیل شده که با توجه به نیاز های متفاوت می تواند به طور جداگانه استفاده گردد. این سیستم در حال حاضر یکی از بهترین سیستم های نگهدارنده بیمار است.

ست کامل جایجایی بیماران اعصاب و روان:

این ست شامل یک جفت دستبند، پابند و یک بند می باشد که دستبند آن به یک کمر بند دوخته شده و توسط بند از پشت به قسمت پابند متصل شده است. این ست دست ها و پاهای فرد را در حالت مناسب و راحتی نگه می دارد و در عین حال از ایجاد صدمه به خود فرد و اطرافیان جلوگیری می کند. با استفاده از این ست امکان راه رفتن در قدم های کوچک و همچنین نشستن ایمن او فراهم می شود.

Complete Set for Ambulation:

Restraint consists of ankle bands, binding band, and a set of wristbands sewn onto the belt band. This restraint is designed to prevent patient aggression, manipulation, self injury, or access to the locks. It also holds the patient's leg and arms in a convenient position. It enables the patient to sit as well as taking short steps.

Complete Set
for Ambulation

R.code

AWD3040



نگهدارنده ویلچری بیمار مدل ARIANA :

نگهدارنده ویلچری ARIANA برای استفاده ایمن و راحت بیمار جهت جلوگیری از مشکلات مربوط به ناپایداری بیمار ، لیز خوردن و افتادن به دلایل فیزیکی یا روانی ساخته شده است که به موجب طراحی ارگونومیک آن موجب سازگاری با بیماران مختلف می گردد.

این نگهدارنده از نوارهای محکم و مقاوم از جنس پلی استر ساخته شده که برای محافظت از بیمار و جلوگیری از ایجاد هرگونه آسیب به کار می رود. جنس آن از پارچه ی نرم پلی استر و کتان است ، به علاوه بخش هایی از نگهدارنده که فشار بیشتری را تحمل می کنند برای راحتی بیشتر بیمار از پدهای نرم ساخته شده اند. این محصول قابل شستشو در دمای ۴۰°C می باشد.

ARIANA Wheelchair Restraint Belt:

The belt have been designed to provide a simple but firm subjection to weak or unstable patients. ARIANA belts have different models to adequate to different needs. It is adjusted to the chair by means of strong polyester straps on both sides and tied together at the back of the seat. The belt is washable up to 40°C.

R.code
ABD 5006



کمربند ویلچری با قفل مغناطیسی



کمربند ویلچری استاندارد

R.code
ABD 5005

کمربند نگهدارنده بیمار مدل ARIANA :

کمربند نگهدارنده بیمار برای نگهداری بیماران بستری به کار می رود. کمربند به تخت و یا بدنه برانکارد فیکس شده و امکان کنترل بیمار توسط پرسنل بخش را میسر می سازد. این کمربند دور کمر بیمار قرار گرفته و احتمال افتادن و یا ایجاد هرگونه آسیب به بیمار را از بین می برد و در عین حال آزادی حرکت مناسبی برای بیمار ایجاد می کند. • در دو سایز L و XL

ARIANA Patient Restraint Belt:

For Bed or Strecher :

Articulated belt which secures the patient from falling down from bed or strecher allowing the patient to turn or change position. It is adpated to the patients waist by Velcro and an adjustable clasp.

- It is available in Large and XLarge strip



R.code	Size
ABD5000	XL
ABD5001	L

Transfer System Ariana:

Ariana Abdominal restraint belt is designed in two models of one and two parts and is used for prevention of patient from falling from the surgical bed or patient transfer beds.

The restraint belt is made of Neoprene material which reduces the pressure to the abdomen and as a result provides comfort for the patient.

This restraint belt is proper for use in surgical recovery rooms, on patient transfer beds, and on ICU beds.

In addition for use of this product on abdomen, it can be used to harness knee and leg

Ariana Belt
OP-1

R.code

ABD5010



Ariana Belt
OP-2

R.code

ABD5011

کمر بند نگهدارنده بیمار مدل Arianamed:

کمر بند نگهدارنده شکمی آریانامد در دو مدل یک تیکه و دوتیکه طراحی شده و برای محافظت از بیمار و جلوگیری از احتمال افتادن از تخت جراحی یا برانکارده به کار می رود.

جنس کمر بند از لاستیک نرم نئوپرن (Neo Prene) بوده که موجب کاهش فشار وارده به شکم و در نتیجه راحتی بیمار می شود.

این کمر بند مناسب برای استفاده در اتاق عمل و ریکاوری، برانکارده و نیز تخت بخش های مراقب ویژه می باشد.

این محصول علاوه بر استفاده شکمی جهت مهار زانو و پای بیمار به کار می رود.

Transfer System Ariana:

Innovative device that provide quick restraint with secure and safe transfer of altered, violent, aggressive or disoriented patients on emergency stretchers. It allows the transfer of patient from the emergency stretcher to other stretcher or bed, without release the restraint.

It consists in a resistant and durable mat provided of a set of harness, wristbands and ankle bands, with quick double velcro closure system and sliding base to improve the transfer.

ست انتقال بیمار مدل ARIANA:

این ست جهت ایجاد ایمنی و نگهداری بیماران بی قرار، غیرقابل کنترل و همچنین جلوگیری از افتادن سایر بیماران به کار می رود.

ست انتقال ARIANA به کاربران خود این اجازه را می دهد که بدون باز کردن سیستم های نگهدارنده متصل، بیماران را از برانکارده اورژانس به برانکارده یا تخت دیگر انتقال دهند.

این ست شامل یک کفی مقاوم و محکم است که بر روی برانکارده یا تخت بسته می شود و بر روی آن نگهدارنده قفسه سینه و کتف، دستبند و پابند با قفل های مغناطیسی قرار می گیرد.

Transfer System

R.code

AWD3010



ARIANA Patient Transfer System:

The board with sliding sleeve for lateral transfers Ariana-Roller can comfortably transfer patients between beds, stretchers, operating tables, X-ray tables, etc. Patients may transfer up to 135 kg between two surfaces with a gap of 20 cm and spaced 20 cm. With improved core and replaceable outer sheath with very low friction and easy sanitation.

- New Core
- X-ray Transparent
- Less Weight
- More Comfortable
- Size:
- Full Board: 180*50 cm
- Half Board: 80*40 cm

R.code	Size
ARM 4011	40*80
ARM 4010	50*180



رول جابجایی بیمار مدل ARIANA:

تخته انتقال بیمار مدل آریانا نسل جدید سیستم های ترانسفر برای جابجایی بیمار به پهلو (در حالت Lateral) از روی تخت بستری، برانکارد، تخت جراحی و یا تخت رادیولوژی (X-ray) می باشد. این تخته قابلیت جابجا کردن بیمار تا ۱۳۵ کیلوگرم بین دو سطح با فاصله حداکثر ۲۰ سانتی متر را دارا می باشد. مواد ارتقا یافته بدنه بسیار سبک بوده و رویه خارجی قابل تعویض آن با اصطکاک بسیار پایین از مزایای قابل توجه این رول می باشد. همچنین رویه رول به راحتی تمیز و در صورت نیاز ضد عفونی می شود. این رول قابل استفاده در بخش رادیولوژی بیمارستان ها بوده و نسبت به X-ray شفاف است و هیچ ردی از خود به جا نمی گذارد.



Step 1



Step 2



Step 3



One Time Installation of Antibacterial Curtain:

This curtain is covered with Ag (Silver) Ion that results in bacteria removal and reduction of transmission probability of pathogenic disease factors from the curtain surface to the patient or ward personnel and from other surfaces to the curtain.

The textile used in simple curtains in hospitals usually have the potential to become a center for aggregation of different bacteria, for example they can stay on these curtains for a long time.

Manufacturing is based on the standards of antibacterial textile AATCC100 and AATCC147 and it is effective on different micro organisms in both simple and antibacterial models:

- Simple models is used in hospital wards with low infection risk with large patient volume and Antibacterial model is used is suitable for special care and infectious (isolation) wards.
- Ease of installation and compatibility with hospital wards
- Provided in different colors: Green, Blue, Yellow ●●●
- Available in three different sizes (small 2.5, medium 5, large 7.5) with 2 meters height

*Arianamed suggests replacement of the curtain every 6 to 12 months. This is dependent on different wards' work load and patient volume.

پرده های یک بار نصب آنتی باکتریال:

این پرده ها از یون نقره پوشیده شده اند که این امر موجب از بین بردن باکتری ها و کاهش احتمال انتقال عوامل بیماری زاى پاتوژنیک از سطح پرده به بیمار یا کارکنان بخش و نیز از سایر سطوح به پرده می شود.

پارچه های پرده های معمولی در بیمارستان ها معمولاً پتانسیل تبدیل شدن به یک مرکز تجمع باکتری های مختلف را دارند. به عنوان مثال می توانند برای مدت بسیار طولانی روی سطح این پرده ها باقی بمانند.

تولید بر اساس استاندارد پارچه های آنتی میکروبیال AATCC147 و AATCC100 و موثر بر میکرو ارگانیسم های مختلف در دو مدل ساده و آنتی باکتریال:

- مدل ساده جهت بخش های بیمارستان با ریسک عفونت پایین و حجم بیمار بالا به کار برده می شود و مدل آنتی باکتریال مناسب جهت بخش های ویژه و عفونی می باشد.
- نصب راحت و آسان و سازگار با بخش های مختلف بیمارستانی
- در رنگ های مختلف: سبز، آبی، زرد ●●●
- موجود در سه سایز مختلف (کوچک ۲/۵ ، متوسط ۵ و بزرگ ۷/۵) با ارتفاع ۲ متر
- *پیشنهاد آریانامد تعویض ۶ تا ۱۲ ماهه پرده های فوق می باشد اما این مسئله بستگی به حجم کاری و بیماراران بخش های مختلف دارد.






ARIANAMED
MEDICAL EQUIPMENT

info@arianamed.com

www.arianamed.com

تجهيزات پزشکی آریانا تشخیص ابزار

خیابان ولیعصر، نرسیده به پارک سعیدی، روبه روی هتل سیمرغ، پلاک ۲۲۰۴، طبقه سوم، واحد ۱۱

فکس: ۰۲۱ ۸۸ ۳۲ ۴۳ ۹۲

تلفن: ۰۲۱ ۸۸ ۳۲ ۴۴ ۹۱